



عدسی های ورزشی و عدسی های قوس دار رودن اشتوک



مجموعه عدسی های ورزشی و قوسدار رودن اشتوک

انواع عدسی های Superior رودن اشتوک

انواع عدسی های ورزشی تک دید با ضرایب شکست متفاوت

Perfalit Sport 2 1.50

Perfalit Sport Polycarbonat 1.59

Perfalit Sport Polarized 1.59

Perfalit Sport 2 1.60

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ 1.60

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60

انواع عدسی های Perfection رودن اشتوک

انواع عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی با ضرایب شکست متفاوت

Impression Mono Sport 2 1.60

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ 1.60

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60

Impression Mono Sport 2 1.67

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ 1.67

انواع عدسی های ورزشی و قوسدار پروگرسو اختصاصی با ضرایب شکست متفاوت

Impression Sport 2 1.50

Impression Sport 2 1.60

Impression Sport 2 ColorMatic IQ 1.60

Impression Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60

Impression Sport 2 1.67

Impression Sport 2 ColorMatic IQ 1.67

Impression FashionCurved 2 1.60

Impression FashionCurved 2 ColorMatic IQ 1.60

Impression FashionCurved 2 ColorMatic IQ Contrast




معرفی انواع محصولات

مناسب برای عینکهای ورزشی و آفتابی با انحنای متعارف و طبیعی که زاویه فیس فرم (FFA) در آنها تا 15° می رسد

مناسب برای عینکهای ورزشی و قوس دار که زاویه فیس فرم (FFA) در آنها تا 30° می رسد و بیس کرو (انحنای پایه) شان 8 است

مناسب برای عینکهای ورزشی قوس دار که یک رو عینکی گیره یی به آنها متصل است و زاویه فیس فرم (FFA) در آنها تا 20° می رسد

مناسب برای فریم های طبی قوس داری که زاویه فیس فرم (FFA) در آنها تا 20° می رسد

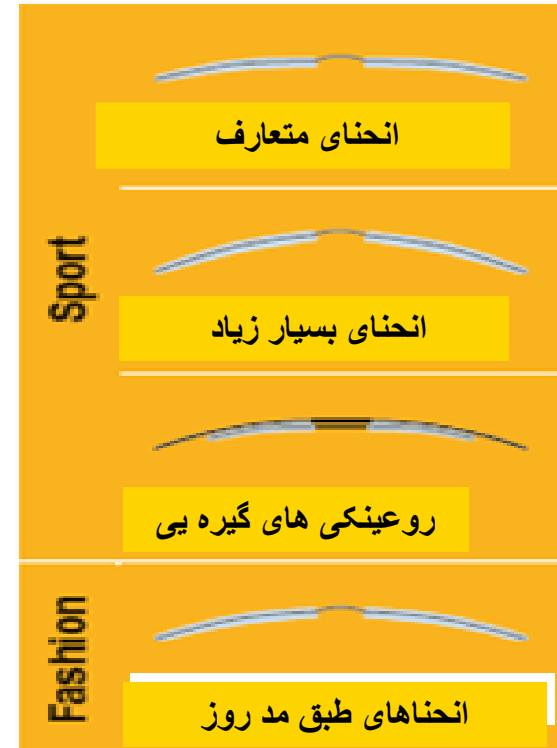

عدسی های Perfalit Sport 2 (عدسی های ورزشی تک دید) معرفی محصول

محصول

- سطح پشتی عدسی های Perfalit Sport 2 به صورت اسفریک / توریک (Spharic/toric) تراش خورده است
- در عدسی های Perfalit Sport 2 رودن اشتوک ابیراهی ها کاملا اصلاح شده است. ابیراهی های مذکور در اثر اختلاف محل قرارگیری عدسی های ورزشی در جلوی چشم ها نسبت به محل قرارگیری عدسی های معمولی در جلوی چشم ها ایجاد می شود (یعنی مایل قرار گرفتن عدسی های ورزشی در جلوی چشم باعث به وجود آمدن این ابیراهی ها می گردد)
- با قرار گرفتن عدسی های Perfalit Sport 2 در محل واقعی خود بهترین دید تضمین می گردد، یعنی اگر عینک در موقعیت صحیحی که باید بر روی صورت بنشیند ، قرار گرفته باشد فرد بهترین دید را تجربه خواهد کرد

عدسی های 2® Perfalit Sport (عدسی های ورزشی تک دید) اطلاعات فنی

ویژگی های فنی

- ✓ عدسی های 2® Perfalit Sport به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام فعالیت های ورزشی مرتفع گردد
- ✓ در عدسی های 2® Perfalit Sport بیس کرو (انحنای پایه) با دقت بالا انتخاب شده تا هنگام نصب عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد
- ✓ در عدسی های 2® Perfalit Sport اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه (Retina Focus Principle) رعایت شده . اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه عبارت است از جدیدترین موقعیت قرارگیری عینک بر روی صورت برای داشتن بهترین دید.
- ✓ در عدسی های 2® Perfalit Sport از تکنولوژی Freeform استفاده شده است *

تکنولوژی Freeform در عدسی های 2® Perfalit Sport با ضریب شکست 1.59 قابل اجرا نیست *



عدسی های Impression Mono Sport 2 (عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی) معرفی محصول

محصول

- Impression Mono Sport 2 ، اولین عدسی ورزشی تک دید اختصاصی
- سطح پشتی عدسی های Impression Mono Sport 2 به صورت اسفریک / توریك (Spharic/toric) تراش خورده
- در عدسی های Impression Mono Sport 2 ، کل سطح عدسی به صورت اختصاصی و آن لاین محاسبه می گردد، و در این محاسبات تمامی پارامترهای مربوط به فریم و مرکز یابی در نظر گرفته می شود
- عدسی های Impression Mono Sport 2 بهترین عملکرد اپتیکی را ارائه می دهند ؛ این بهترین عملکرد نمرات بالا، سینندر، و پریزم را نیز در بر می گیرد

عدسی های Impression Mono Sport® 2 (عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی) اطلاعات فنی

اطلاعات فنی

- ✓ در عدسی های Impression Mono Sport® 2 از تکنولوژی EyeLT® استفاده شده است
- ✓ در عدسی های Impression Mono Sport® 2 سایز مردمک بهینه شده است
- ✓ در طراحی و ساخت عدسی های Impression Mono Sport® 2 پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به بهترین شکل ممکنه و دقیقترین حالت در نظر گرفته شده
- ✓ در عدسی های Impression Mono Sport® 2 بیس کرو (انحنای پایه) با دقت انتخاب شده تا هنگام نصب عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد
- ✓ در عدسی های Impression Mono Sport® 2 اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه (Retina Focus Principle) رعایت شده
- ✓ در عدسی های Impression Mono Sport® 2 از تکنولوژی Freeform استفاده شده است

عدسی های Impression Sport® 2 (عدسی های ورزشی پروگرسیو اختصاصی) معرفی محصول

محصول

- عدسی های Impression Sport® 2 به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام فعالیتهای ورزشی را مرتفع گردد. بنابراین عدسی های ورزشی Impression میدان دید وسیعتری دارند.
- از آنجائیکه در اغلب فعالیتهای ورزشی ، دید نزدیک به جای 40 cm در فاصله 60 cm انجام می گیرد ، لذا دید نزدیک در عدسی های Impression Sport 2 برای فاصله 60 cm طراحی شده است.

عدسی های 2 Impression Sport® (عدسی های ورزشی پروگرسیو اختصاصی)

اطلاعات فنی

ویژگی های فنی

- ✓ در عدسی های 2 Impression Sport® از تکنولوژی EyeModel استفاده شده است
- ✓ در عدسی های 2 Impression Sport® سایز مردمک بهینه شده است
- ✓ در طراحی و ساخت عدسی های 2 Impression Sport® پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به بهترین شکل ممکنه و دقیقترین حالت در نظر گرفته شده
- ✓ در عدسی های 2 Impression Sport® توان (نمره عدسی) به طور اختصاصی بهینه شده تا مناطق دید دوچشمی در این عدسی ها حداقل اعوجاج را داشته باشد
- ✓ عدسی های 2 Impression Sport® به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام فعالیتهای ورزشی مرتفع گردد.
- ✓ در عدسی های 2 Impression Sport® بیس کرو (انحنای پایه) با دقت انتخاب شده تا هنگام نصب عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد
- ✓ در عدسی های 2 Perfalit Sport® اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه (Retina Focus Principle) رعایت شده . اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه عبارت است از جدیدترین موقعیت قرارگیری عینک بر روی صورت برای داشتن بهترین دید.
- ✓ در عدسی های 2 Impression Sport® از تکنولوژی Freeform استفاده شده است

عدسی های 2 Impression FashionCurved® (عدسی های قوس دار پروگرسو اختصاصی)

معرفی محصول



محصول

عدسی های 2 Impression FashionCurved® برای برای فریمهای قوس داری که زاویه فیس فرم شان زیاد است ، زاویه فیس فرم در برخی از این قبیل فریم ها تا 20° نیز می رسد.

با استفاده از عدسی های 2 Impression FashionCurved می توان میان عملکرد اپتیکی و عملکرد زیبایی در فریمهای ورزشی و فریم های قوس دار هماهنگی و سازگاری دقیق و بی نقصی را ایجاد نمود.

عدسی های 2 Impression FashionCurved® (عدسی های قوس دار پروگرسیو اختصاصی) اطلاعات فنی

ویژگی های فنی

- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® از تکنولوژی EyeModel استفاده شده است
- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® سایز مردمک بهینه شده است
- ✓ در طراحی و ساخت عدسی های 2 Impression FashionCurved® تمام پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به بهترین شکل ممکنه و دقیقترین حالت در نظر گرفته شده
- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® توان (نمره عدسی) به طور اختصاصی بهینه شده
- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® بیس کرو (انحنای پایه) با دقت انتخاب شده تا هنگام نصب عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد
- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه (Retina Focus Principle) رعایت شده
- ✓ در عدسی های 2 Impression FashionCurved® از تکنولوژی Freeform استفاده شده است

!!عدسی های Impression FashionCurved برای ورزشهای دینامیک و پرتحرک مناسب نیست!!




عدسی های 2 Impression FashionCurved® (عدسی های قوس دار پروگرسیو اختصاصی) معرفی محصول

- در عدسی های 2 Impression FashionCurved® به موهبت استفاده از تکنولوژی Eye Lens و نیز در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اختصاصی حداکثر راحتی دید ایجاد شده است
- در عدسی های 2 Impression FashionCurved® اینست به طور دقیق برای فاصله نزدیک ۴۰ سانتی متری در نظر گرفته شده است
- در عدسی های 2 Impression FashionCurved® به موهبت طراحی خاص بخش دید دور و قسمتهای کناری اعوجاج بسیار اندک است ، حتی در عینک هایی که زاویه فیس فرمشان بیش از حد متعارف است
- در عدسی های 2 Impression FashionCurved® بزرگنمایی عینک ثابت است و بازتابهای سطح جلویی یکنواخت و یکسانند
- تصویری که توسط عدسی های 2 Impression FashionCurved® پس از نصب بر روی فریم های قوس دار ایجاد می شود بسیار بهتر از تصویری است که توسط عدسی های معمولی ایجاد می شود که بدون انجام محاسبات خاص بر روی فریم های قوس دار نصب شده اند. به عبارت ساده تر تصویرسازی در عدسی های Impression FashionCurved® 2 بهبود یافته

مزایا برای مصرف کننده

پی دی اصلاح شده (COR PD) اطلاعات فنی

- در تصویر زیر صفحه عینک و صفحه عدسی بر هم منطبق نیستند که دلیل آن زیاد بودن زاویه فیس فرم است
- بنابراین در هنگام نصب عدسی بر روی فریم های ورزشی و فریم های قوسدار باید از پی دی اصلاح شده (COR PD) که روی پاکت عدسی درج شده استفاده شود

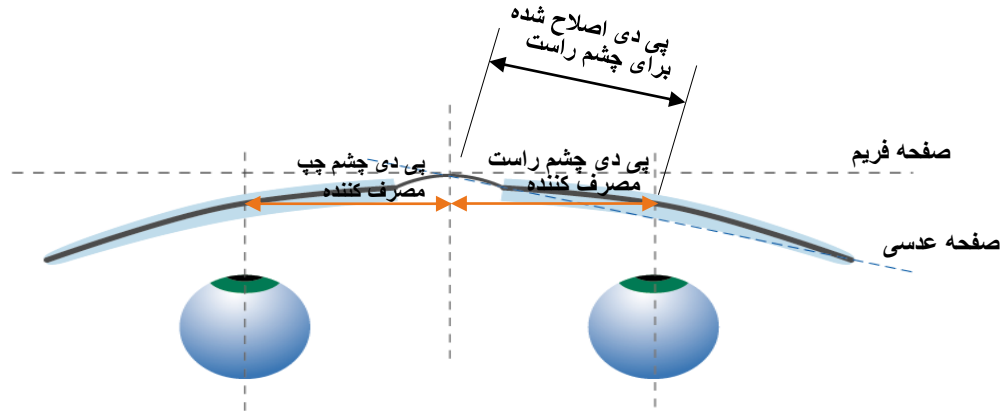

(COR PD)
پی دی اصلاح شده

با سپاس از توجه شما



RODENSTOCK
See better. Look perfect.